

Οδηγίες Χρήσης Διαδικτυακής πλατφόρμας Aidplex ScolioSense

Έκδοση εγγράφου: 8

Κατασκευαστής: Aidplex

Τελευταία τροποποίηση: 28-08-2026



Οδηγίες Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Το εγχειρίδιο αφορά τη διαδικτυακή πλατφόρμα **ScolioSense** του AIDPLEX SCOLIOSIS, με την εμπορική ονομασία **ScolioSense**, ένα προϊόν της Aidplex. Το περιεχόμενο πληροφοριών ανήκει στην Aidplex και παρέχεται μόνο για τον χειρισμό συσκευών και λογισμικού της Aidplex.

Αυτό το εγχειρίδιο υπόκειται σε τροποποιήσεις.

Τελευταία έκδοση: <https://scoliosense.com/Home/SupportEN>.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα	2
Εισαγωγή	3
Η εταιρεία	3
Σημαντική σημείωση ασφαλείας	4
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ	4
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ	4
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ	5
Γενικές Συνθήκες Λειτουργίας	5
Λειτουργικό περιβάλλον	5
Διαδικτυακή Πλατφόρμα ScolioSense	6
Προσόντα χρήστη	6
Περιγραφή	6
Ξεκινώντας	7
Εγγραφή νέου χρήστη	7
Σύνδεση λογαριασμού χρήστη	8
Σελίδα Ασθενών	8
Σελίδα ασθενών για ιατρούς	8
Προσθήκη ασθενών	11
Ο Λογαριασμός μου (My Profile)	15
Καρτέλα Ασθενή (Patient details)	17
Καρτέλα Ασθενή	17
Σελίδα γραφημάτων πίεσης (Adjustment graph)	21
Fitting History	21
Σελίδα τροποποίησης στοιχείων ασθενή (Edit patient)	22
Ρύθμιση κηδεμόνα-Calibration	22
Επιλογές Βαθμονόμησης:	23
Βοήθεια	26
Ειδοποιήσεις	27
Εβδομαδιαία Αναφορά Συμμόρφωσης	27
Προτιμήσεις Ασθενή,	29
Ξέχασα τον κωδικό	30
Αναφορά Email	31
Αντιμετώπιση προβλημάτων	32
Νομικές πληροφορίες	33
Πολιτική εξυπηρέτησης	33
Προειδοποίηση	34
Στοιχεία επικοινωνίας	34

Εισαγωγή

Ενδεδειγμένη Χρήση:

Το AIDPLEX SCOLIOSIS είναι ένα εξάρτημα που προορίζεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με έναν κηδεμόνα σκολίωσης, ο οποίος αποτελεί και ο ίδιος ιατροτεχνολογικό προϊόν, ώστε να υποστηρίξει τη συμμόρφωση του ασθενούς με το πρόγραμμα χρήσης του κηδεμόνα σκολίωσης που έχει ορίσει ο επιβλέπων ιατρός, καθώς και να βοηθήσει τον ιατρό να επαληθεύσει ότι ο κηδεμόνας εξακολουθεί να φοριέται συνεπώς με τη διαμόρφωση που καθόρισε κατά την τοποθέτηση.

Το AIDPLEX SCOLIOSIS αποτελείται από: μια φορητή συσκευή, τοποθετημένη στον κηδεμόνα, η οποία χρησιμοποιεί αναλογικούς και/ή ψηφιακούς αισθητήρες για την καταγραφή του τρόπου χρήσης του κηδεμόνα από τον ασθενή· μια εφαρμογή κινητού για τον ασθενή, η οποία εμφανίζει τον χρόνο χρήσης σε σχέση με το πρόγραμμα χρήσης που έχει ορίσει ο επιβλέπων ιατρός και επιτρέπει στον ασθενή να καταγράφει, προαιρετικά, ένα στιγμιότυπο της τρέχουσας τοποθέτησης του κηδεμόνα, καθώς και στους ιατρούς ή στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό να ρυθμίζουν τη συσκευή· και μια εφαρμογή web για τον επιβλέποντα ιατρό, η οποία εμφανίζει το ιστορικό χρήσης του κηδεμόνα και υποδεικνύει εάν η τοποθέτηση του κηδεμόνα παραμένει συνεπής με τη διαμόρφωση αναφοράς που καθορίστηκε από τον επιβλέποντα ιατρό κατά την τοποθέτηση.

Οι πληροφορίες χρήσης του κηδεμόνα που παράγει η συσκευή είναι σχετικές με τη διαμόρφωση αναφοράς και το πρόγραμμα χρήσης που έχει ορίσει ο ιατρός, και δεν αποτελούν απόλυτη ή βαθμονομημένη κλινική μέτρηση. Η συσκευή δεν παρέχει διαγνωστικές πληροφορίες, δεν αξιολογεί την εξέλιξη της σκολίωσης ούτε την αποτελεσματικότητα της θεραπείας, και δεν καθορίζει ούτε αντικαθιστά κλινικές αποφάσεις. Δεν πραγματοποιεί, δεν εμφανίζει και δεν αναφέρει καμία κλινική μέτρηση.

Η συσκευή είναι μη επεμβατική: δεν αλληλεπιδρά με τη φυσιολογία του ασθενούς, δεν έρχεται σε επαφή με το ανθρώπινο σώμα, ούτε μεταβάλλει την απόδοση του κηδεμόνα με τον οποίο χρησιμοποιείται.

Το AIDPLEX SCOLIOSIS, με την εμπορική ονομασία **ScolioSense** αποτελείται από: τη φορητή συσκευή (συσκευή **ScolioSense**), την εφαρμογή κινητού (**ScolioSense** app) και την εφαρμογή web (διαδικτυακή πλατφόρμα **ScolioSense**).

Η εταιρεία

Η Aidplex είναι μια εταιρεία ιατροτεχνολογικών προϊόντων που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, από τον Χάρη Γερεμτζέ και τον Δημήτριο Μουστάκα. Τα προϊόντα της εταιρείας

επικεντρώνονται στον τομέα της Ορθωτικής και Προσθετικής, ιδίως σε φορητές συσκευές που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Το Aidplex Scoliosis είναι ένα προϊόν αφιερωμένο στην υποστήριξη της τήρησης της θεραπείας με κηδεμόνα από ασθενείς με σκολίωση.

Περισσότερες πληροφορίες: www.aidplex.com.

Σημαντική σημείωση ασφαλείας

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Η φορητή συσκευή **ScolioSense** δεν προορίζεται για:

- Οποιαδήποτε χρήση εκτός της εγκατάστασης της εξωτερικά του κηδεμόνα.
- Άμεση επαφή με το σώμα, ανοιχτές πληγές, καμένο ιστό, κοντά στα μάτια και κοντά σε κατάγματα.
- Διαφορετική πάθηση πέραν της σκολίωσης και για ασθενείς οι οποίοι δεν είναι χρήστες του **ScolioSense**.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα **ScolioSense** δεν προορίζεται για:

- Οποιαδήποτε χρήση εκτός του επιβλέποντα ιατρού και εξουσιοδοτημένου προσωπικού.
- Χρήση ως κατάλογος ασθενών για διαφορετικές παθήσεις.

Η mobile εφαρμογή δεν προορίζεται για:

- Οποιαδήποτε χρήση εκτός του ασθενή σκολίωσης και χρήστη του συστήματος της Aidplex με την άδεια του αρμόδιου ιατρού.
- Ταυτόχρονη χρήση από πολλαπλές κινητές συσκευές.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το **ScolioSense** ενδείκνυται για:

- Ασθενείς σκολίωσης που ακολουθούν θεραπεία με τη χρήση κηδεμόνα και χρησιμοποιούν το **ScolioSense app** και τη συσκευή **ScolioSense**.
- Επιβλέποντες ιατρούς με ασθενείς που ακολουθούν θεραπεία σκολίωσης με τη χρήση κηδεμόνα και χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή πλατφόρμα **ScolioSense**.
- Την εξασφάλιση και διασφάλιση της πορείας της θεραπείας σκολίωσης με τη χρήση κηδεμόνα.
- Τη διασφάλιση της τοποθέτησης αλλά και χρήσης του κηδεμόνα σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντα ιατρού.

- Την υπενθύμιση του ασθενή σχετικά με την ενδεδειγμένη τοποθέτηση του κηδεμόνα με βάση τις οδηγίες του επιβλέποντα ιατρού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του συστήματος **ScolioSense** πέραν της ενδεδειγμένης.
- Η διαδικτυακή πλατφόρμα **ScolioSense** θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από επιβλέποντες ιατρούς και εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Το **ScolioSense** app πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ασθενείς σκολίωσης που ακολουθούν θεραπεία με τη χρήση κηδεμόνα, ή από τον επιβλέποντα ιατρό και εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Η φορητή συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί μόνο σε κηδεμόνες και μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, το οποίο έχει ακολουθήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης για την εγκατάσταση.
- Η φορητή συσκευή δεν πρέπει να ανοίγει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Οι ασθενείς δεν πρέπει να παρεμβαίνουν στη σύνδεση ή αποσύνδεση των αισθητήρων από τη φορητή συσκευή.
- Η διαδικασία της ρύθμισης του κηδεμόνα (calibration) της διαδικτυακής πλατφόρμας **ScolioSense** δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της τοποθέτησης του κηδεμόνα παρά μόνο για την αποτύπωση της ενδεδειγμένης χρήσης που έχει ορίσει ο επιβλέπων ιατρός.
- Η διαδικασία τοποθέτησης στην εφαρμογή ScolioSense για κινητά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της τοποθέτησης του κηδεμόνα, παρά μόνο για την καταγραφή ενός στιγμιότυπου της τρέχουσας τοποθέτησης του ασθενή, σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντα ιατρού.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να τροποποιήσετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή. Αυτό πρέπει να γίνεται μόνο από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Γενικές Συνθήκες Λειτουργίας

Λειτουργικό περιβάλλον

Για την προσπέλαση της διαδικτυακής πλατφόρμας **ScolioSense** ο χρήστης πρέπει να διαθέτει ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και σύνδεση στο διαδίκτυο. Το **ScolioSense** υποστηρίζει

πρόσφατες εκδόσεις του Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge και σε κινητά iOS και Android.

Διαδικτυακή Πλατφόρμα ScolioSense

Προσόντα χρήστη

Το σύστημα **ScolioSense** προορίζεται για ασθενείς με σκολίωση, οι οποίοι φορούν κηδεμόνα, και για τους επιβλέποντες ιατρούς τους. Το **ScolioSense app** και η συσκευή **ScolioSense** χρησιμοποιούνται από τους ασθενείς. Η διαδικτυακή πλατφόρμα **ScolioSense** χρησιμοποιείται από ιατρικό προσωπικό ή εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Ομάδα επαγγελματιών χρηστών

Οι ορθωτικοί, ιατροί και άλλοι εξουσιοδοτημένοι επαγγελματίες υγείας που χρησιμοποιούν το ScolioSense πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:

- Να κατέχουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό προσόν ή άδεια άσκησης επαγγέλματος στην ορθωτική, προσθετική ή σε συναφή κλινική ειδικότητα, όπως ισχύει βάσει του σχετικού εθνικού κανονιστικού πλαισίου.
 - Να έχουν λάβει εκπαίδευση στην τοποθέτηση κηδεμόνων σκολίωσης, στο πλαίσιο του επαγγελματικού τους προσόντος ή της συνεχιζόμενης εκπαίδευσής τους.
 - Να έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση ή τις οδηγίες που παρέχει ο κατασκευαστής, ειδικά για το ScolioSense, σχετικά με την τοποθέτηση της φορητής συσκευής, τη χρήση της εφαρμογής web και της εφαρμογής κινητού, καθώς και τη διαδικασία καταγραφής της ρύθμισης αναφοράς, πριν από την ανεξάρτητη χρήση.
 - Να διαθέτουν επαρκή ψηφιακή εξοικείωση ώστε να χειρίζονται ένα τυπικό πρόγραμμα περιήγησης web χωρίς επιπλέον υποστήριξη.
- Δεν απαιτείται καμία φυσική ή αισθητηριακή ικανότητα πέραν εκείνης που ήδη απαιτείται για τη χειροκίνητη τοποθέτηση κηδεμόνα, για αυτή την ομάδα χρηστών.

Περιγραφή

Η διαδικτυακή πλατφόρμα **ScolioSense** διαθέτει 7 σελίδες:

1. Σελίδα σύνδεσης χρήστη: Πραγματοποιείται είσοδος στην πλατφόρμα
2. Σελίδα εγγραφής χρήστη (Register): Πραγματοποιείται εγγραφή στην πλατφόρμα
3. Σελίδα ασθενών (Dashboard): Η κεντρική σελίδα της πλατφόρμας του **ScolioSense**. Περιέχει μια σύνοψη των ασθενών καθώς και συγκεντρωτικά γραφήματα με πληροφορίες για τους ασθενείς.
4. Σελίδα καρτέλας ασθενή (Patient Details): Περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για τον ασθενή και τη θεραπεία του.

5. Σελίδα επεξεργασίας στοιχείων ασθενή (Patient Edit): Ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί τις πληροφορίες του ασθενή.
6. Σελίδα προφίλ (Profile): Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία του και τον κωδικό πρόσβασης για την πλατφόρμα **ScolioSense**.
7. Σελίδα βοήθειας (Help): Ο χρήστης μπορεί να διαβάσει τις ενημερωμένες οδηγίες χρήσης της διαδικτυακής πλατφόρμας

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Για να επισκεφθείτε τη διαδικτυακή πλατφόρμα **ScolioSense** επισκεφθείτε το www.scoliosense.com.

Εγγραφή νέου χρήστη

Για την εγγραφή στη διαδικτυακή πλατφόρμα **ScolioSense** πατήστε τον [σύνδεσμό](#). Θα πρέπει να συμπληρώσετε τη διεύθυνση email σας και ένας εκπρόσωπος της **Aidplex** θα επικοινωνήσει μαζί σας για τη δημιουργία του λογαριασμού.

Thank you for your interest!

The registration process for Doctors and Manufacturers is **currently closed**.

To stay updated please provide us with your email address, and we will notify you accordingly when you are eligible to apply.



Notify me

[Already Have Account? Login now](#)

Σύνδεση λογαριασμού χρήστη

Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού σας μπορείτε να συνδεθείτε στη διαδικτυακή πλατφόρμα **ScolioSense** σε αυτό τον [σύνδεσμο](#) συμπληρώνοντας τα στοιχεία σύνδεσής σας.

Login

Enter your email address and password to login on the ScolioSense platform for Doctors and Manufacturers.

demo@aidplex.com

.....



☐ Remember Me

[Forgot your password?](#)

Sign in

[New to ScolioSense? Join now](#)


Σελίδα Ασθενών

Σελίδα ασθενών για ιατρούς


Κάτω από αυτή την ενότητα μπορείτε να δείτε τη λίστα με τους ασθενείς σας. Η λίστα περιέχει το Όνομα, Επώνυμό, Τύπο Σκολίωσης, Μέσο Χρόνο Φορέματος του κηδεμόνα και Ειδοποιήσεις.

Τύπος Σκολίωσης: Η ταξινόμηση γίνεται σε τύπο S ή C.

Μέσος χρόνος χρήσης κηδεμόνα: Η μέτρηση εμφανίζεται πράσινη όταν ικανοποιεί τον συνιστώμενο χρόνο, διαφορετικά κόκκινη. Τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού πάνω από τη μέτρηση, παρουσιάζεται ο αριθμός των συνιστώμενων ωρών χρήσης.

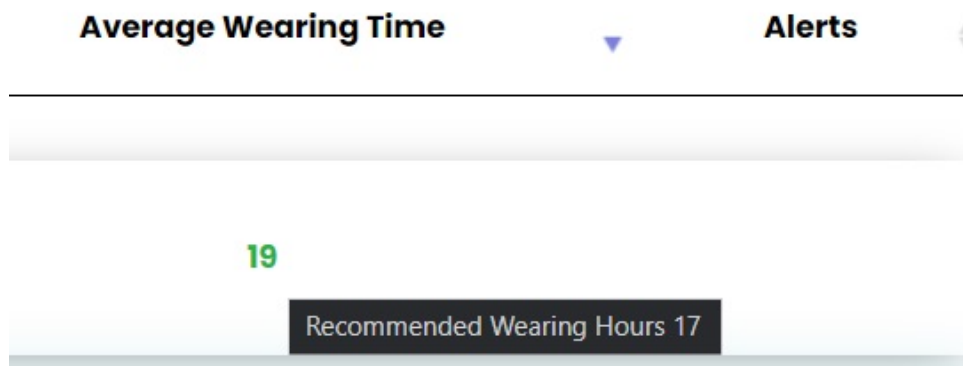

Ειδοποιήσεις : Οι ειδοποιήσεις υποδεικνύουν εάν ο ασθενής δεν είχε δεδομένα για τις τελευταίες 3 ή 7 ημέρες. Η ειδοποίηση εμφανίζεται με πορτοκαλί χρώμα στην πρώτη [1] ενώ με κόκκινο στη δεύτερη[2] περίπτωση.

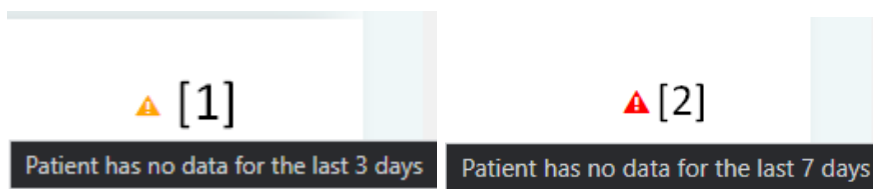

My Patients					Search
First Name	Last Name	Scoliosis Type	Average Wearing Time	Alerts	
Dimitris	Moustakas	S	46	▲	
Argiris	Mouratidis	C	122	▲	
Dimitra	Natsidou	C	25	▲	
Aristotelis	Pallasidis	S	92		
Dimitris	Sakkoulas	C	34		


Previous 1 2 Next

Add patient

1. Πατώντας το κουμπί + στο κάτω μέρος της λίστας ασθενών, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν [καινούργιο λογαριασμό ασθενή](#) στην πλατφόρμα.
2. Μέσα από τη γραμμή αναζήτησης μπορείτε εύκολα και γρήγορα να αναζητήσετε τους ασθενείς σας.


Στο κάτω μέρος της Σελίδας των Ασθενών, υπάρχουν 2 συγκεντρωτικά γραφήματα:

Συμμόρφωση (Adherence)

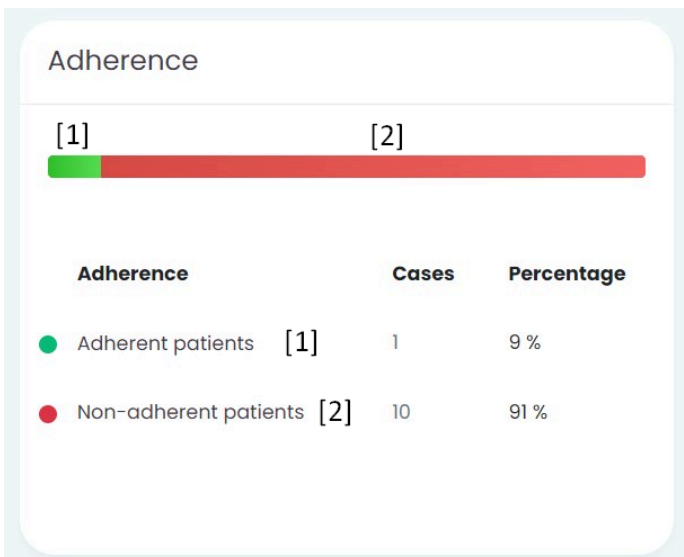

1. Συμμορφωμένοι
2. Μη συμμορφωμένοι

Τύπος σκολίωσης ανά φύλο (Overview)

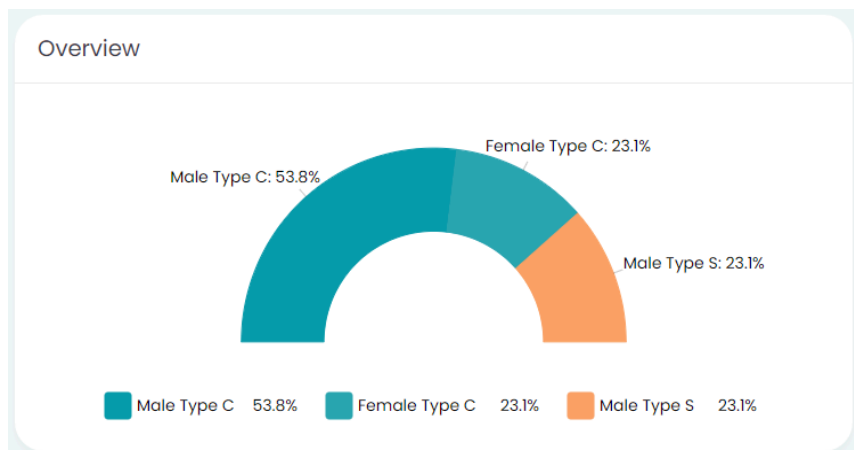

Προσθήκη ασθενών

Register new patient

 Patient

 Family

 Treatment

 Finish

Patient details:

Step 1/4

Fields with asterisk (*) are required

First Name *

Tasos

Last Name *

Anastasiadis

Date of birth *

06/17/2014

Sex

☒ Male ☐ Female

Height (in cm)

143

Weight (kg)

49

Next

Στην ενότητα στοιχεία ασθενούς (Patient Details) για την εγγραφή ενός ασθενή, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία:

1. Όνομα
2. Επώνυμο
3. Ημερομηνία Γέννησης
4. Φύλο
5. Ύψος
6. Βάρος

Όλα τα απαιτούμενα πεδία επισημαίνονται με αστερίσκο (*)

Register new patient

Patient

Family

Treatment

Finish

Family Information: Step 2/4

Fields with asterisk (*) are required

Email of the guardian*

tasos@aidplex.com

Address

Chalkeon 19, Thessaloniki

Time Zone*

(GMT +2:00) Eastern European Time

Guardian's phone number*

Greece (+30) 6971554267

Guardian's weekly email report language

☒ English ☐ Ελληνικά

Back **Next**

Στο βήμα Πληροφορίες Οικογένειας(Family), εισαγάγετε τη διεύθυνση email του κηδεμόνα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση κατοικίας, τη ζώνη ώρας και επιλέξτε την προτιμώμενη γλώσσα για την εβδομαδιαία αναφορά του κηδεμόνα. Θυμηθείτε ότι τα απαιτούμενα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν για να συνεχίσετε. Πατήστε Επόμενο για να προχωρήσετε στις λεπτομέρειες θεραπείας.

1. Διεύθυνση Email Κηδεμόνα (Θα χρησιμοποιηθεί για την είσοδο στην εφαρμογή ScolioSense.)
2. Τηλέφωνο Κηδεμόνα
3. Διεύθυνση Κατοικίας
4. Ζώνη Ώρας
5. Γλώσσα Αναφοράς

*Δημιουργίας Λογαριασμού Ασθενή

Κατά τη δημιουργία λογαριασμού ασθενή, η δυνατότητα καταχώρισης διεύθυνσης email είναι διαθέσιμη για άτομα ηλικίας 13 ετών και άνω.

- **Ηλικίες 13–14:** Οι ασθενείς αυτής της ηλικιακής ομάδας μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην εφαρμογή με τη διεύθυνση email τους, κατόπιν επιβεβαιωμένης συναίνεσης γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα.
- **Ηλικίες 15 και άνω:** Οι ασθενείς ηλικίας 15 ετών και άνω μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην εφαρμογή χωρίς περιορισμούς.

Scoliosis Type Selection

Type S For Type S scoliosis, 2 Main Sensors are needed 1 for each spinal curve to ensure precise monitoring. Select Type S	Type C For Type C scoliosis, 1 Main Sensor and 1 Support Sensor are needed to ensure precise monitoring. Select Type C
--	--

Understanding Type C Scoliosis & Sensor Placement

For Type C scoliosis, two sensors are required:

- The first sensor is the **Main Sensor**, placed over the primary curvature.
- The second sensor acts as a **Support Sensor**, positioned opposite the primary curvature.
- This setup ensures optimal monitoring of the brace's corrective effect.

Scoliosis Type C - Sensor Placement

Sensor 1 Placement (Position this sensor on the most pronounced spinal curve) *

Left Thoracic

Type

Main Sensor

Sensor 2 Placement (Place this sensor on the opposite side of the primary curve) *

Right Thoracic

Type

Support Sensor

Add Optional Sensor

Στο βήμα Πληροφορίες Θεραπείας, επιλέξτε τον τύπο σκολίωσης (Τύπος S ή Τύπος C). Και οι δύο τύποι σκολίωσης απαιτούν τουλάχιστον δύο αισθητήρες.

- Ο **Τύπος S** σκολίωσης περιλαμβάνει δύο κυρτώσεις της σπονδυλικής στήλης και απαιτεί δύο **κύριους αισθητήρες**, τοποθετημένους στην κορυφή κάθε καμπύλης.
- Ο **Τύπος C** σκολίωσης περιλαμβάνει μία κυρτότητα και απαιτεί έναν **κύριο αισθητήρα** (Main Sensor)
- στην κορυφή της καμπύλης και έναν **βοηθητικό αισθητήρα** (Support) στην απέναντι πλευρά.
Ο υποστηρικτικός αισθητήρας παρακολουθεί τη συνολική ημερήσια διάρκεια χρήσης, αλλά **δεν** χαρακτηρίζει τον χρόνο φορέματος κηδεμόνα με ενδεδειγμένη ή μη τοποθέτηση

Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον αισθητήρα πατώντας το κουμπί **Add Optional sensor** και επιλέγοντας αν ο αισθητήρας είναι **κύριος** ή **βοηθητικός**.

Starting Cobb Angle 1

25

Cobb Angle 1 with brace

10

Skeletal Maturity Scale

Sanders

Sanders Maturity Scale

Sanders 5

Recommended Wearing Hours

18

Manufacturer ®

Brace Manufacturer

Back

Next

Επιπλέον, ρυθμίστε τις γωνίες Cobb, τις προτεινόμενες ώρες χρήσης, την κλίμακα ωρίμανσης του σκελετού (Risser ή Sanders) και επιλέξτε τον ορθωτικό ή ιατρό που είναι υπεύθυνος για αυτόν τον ασθενή.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ένα αυτοματοποιημένο email θα σταλεί στο email του ασθενή σας.

Αφού δημιουργηθεί ο ασθενής, αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να τροποποιηθούν στη σελίδα επεξεργασίας. Εάν ένας αισθητήρας αλλάξει τύπο από κύριο σε βοηθητικό, θα σταλεί ειδοποίηση στην κινητή συσκευή του ασθενή για τον συγχρονισμό των αλλαγών. Εάν συμβεί το αντίθετο, απαιτείται νέα βαθμονόμηση

Register new patient

Account

Personal

Treatment

Finish

Finish:


Registering new patient

Step 4 - 4



Ο Λογαριασμός μου (My Profile)

Για να δείτε τον λογαριασμό σας επιλέξτε είτε το όνομά σας επάνω δεξιά και στη συνέχεια την επιλογή my profile είτε το εικονίδιο του profile από το πλευρικό μενού.

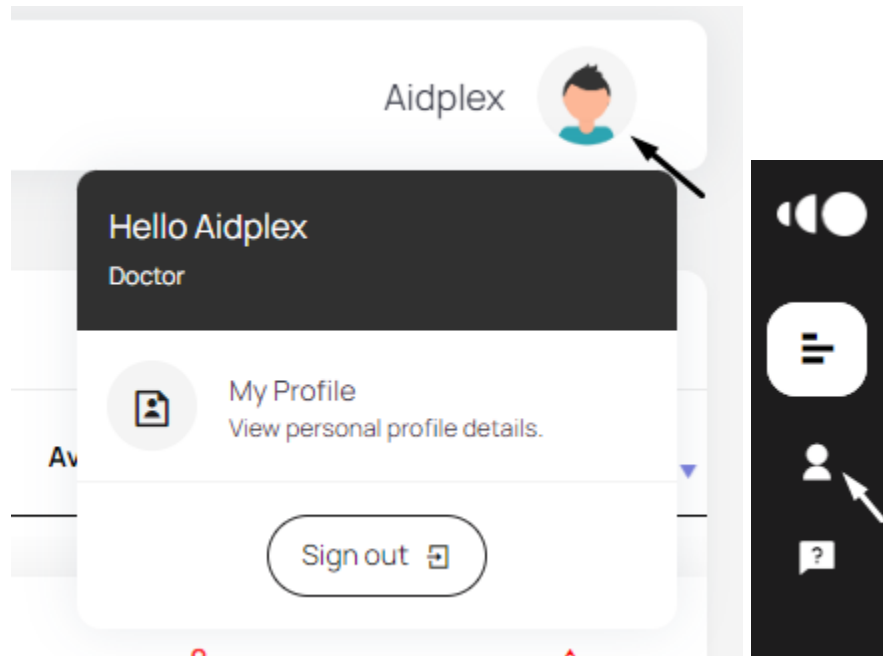

Μέσα από την οθόνη του προφίλ μπορείτε να αλλάξετε τα παρακάτω:

1. Όνομα
2. Επίθετο
3. Αριθμό τηλεφώνου
4. Ζώνη ώρας

Σημαντικό: Το email[3] δεν μπορεί να αλλαχθεί. Σε περίπτωση που επιθυμείτε αλλαγή της διεύθυνσης email, επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα στο support@aidplex.

Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί[5].

Personal Information

First Name:	Last Name:
Aidplex [1]	Test [2]
Email:	Phone Number:
test@doc.com [3]	6971554247 [4]
Timezone	
(GMT +2:00) Eastern European Time [5]	
Save changes [6]	

Αν επιθυμείτε να αλλάξετε τον κωδικό σύνδεσής σας θα πρέπει να επιλέξετε την καρτέλα [6]

Personal Information

Change Password

Change Password

Current Password:
..... [1]
New Password:
..... [2]
Confirm Password:
..... [3]
Submit

Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης σας, θα πρέπει να εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης[1].

Στην περίπτωση που ο κωδικός πρόσβασης δεν είναι σωστός εμφανίζεται μήνυμα, όπως φαίνεται παρακάτω.

Στη συνέχεια θα πρέπει να εισάγετε τον νέο κωδικό[2] και να τον επιβεβαιώσετε στο πεδίο[3].

Current Password: Your password was incorrect.

.....

Για την αποθήκευση του νέου κωδικού πρόσβασης θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί Submit.

Καρτέλα Ασθενή (Patient details)

Καρτέλα Ασθενή

Για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες ενός ασθενή σας θα πρέπει να επιλέξετε τον ασθενή από τον κατάλογο της σελίδας ασθενών.

My Patients					Tasos
First Name	Last Name	Scoliosis Type	Average Wearing Time	Alerts	
Tasos	Anastasiadis	S	14		
Previous	1	Next			


Στο πρώτο μέρος της οθόνης εμφανίζονται μερικά προσωπικά στοιχεία του ασθενή σας όπως:

1. Βάρος
2. Ύψος
3. Τρέχουσα γωνία Cobb, (στην περίπτωση που ασθενής έχει σκολίωση τύπου S τότε εμφανίζονται και οι δυο γωνίες Cobb),

4. Ηλικία

5. Τοποθεσία του ασθενή

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του ασθενή σας, πατώντας το κουμπί [6] ώστε να μεταφερθείτε στη [Σελίδα τροποποίησης στοιχείων ασθενή](#).

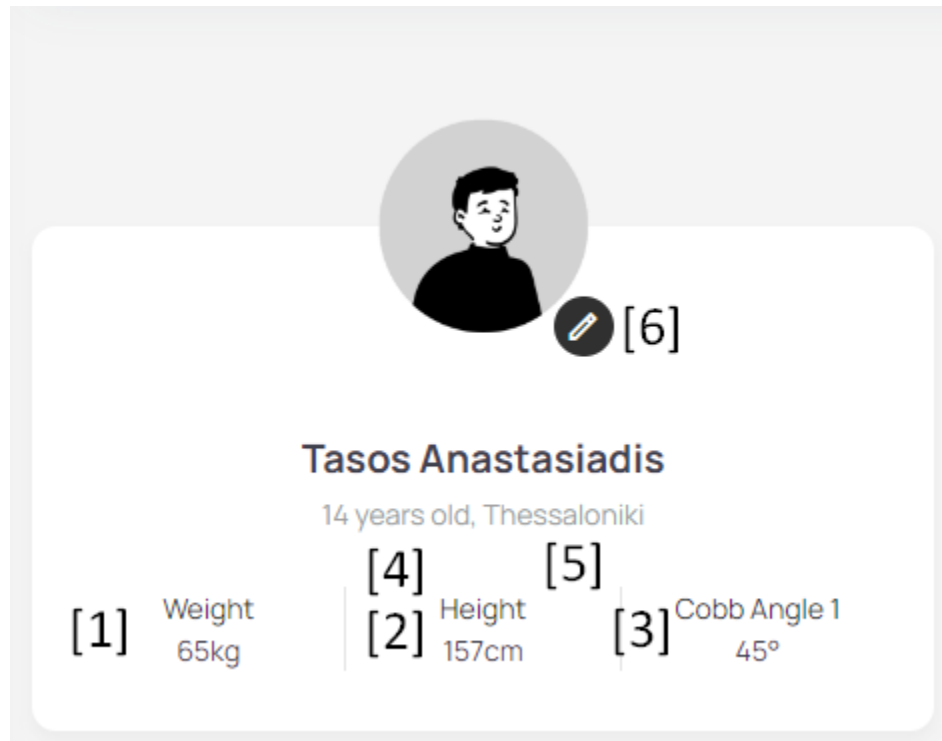

A patient profile card for Tasos Anastasiadis. At the top is a circular profile picture of a young man, with a pencil icon and the number [6] next to it. Below the name, it says "14 years old, Thessaloniki". The card displays three data points: [1] Weight 65kg, [2] Height 157cm, and [3] Cobb Angle 1 45°. The numbers [4] and [5] are placed above the Height and Cobb Angle labels respectively.

Label	Value
[1] Weight	65kg
[4] Height	157cm
[5] Cobb Angle 1	45°

Κάτω από τις προσωπικές πληροφορίες του ασθενή, τα γραφήματα πίεσης των αισθητήρων εμφανίζουν το συνιστώμενο εύρος πίεσης με σκούρο μπλε χρώμα. Η τελευταία ρύθμιση του κηδεμόνα υποδεικνύεται με μωβ δείκτη.

Sensor calibration information



Left Upper Thoracic



Fitting Area


Patient's last fitting

Close

Δίπλα στις πληροφορίες του ασθενή βρίσκεται το γράφημα σύνοψης χρήσης του κορσέ. Κάθε μπάρα αντιπροσωπεύει μία ημέρα. Οι ώρες χρήσης με τη σωστή εφαρμογή του κορσέ [2] απεικονίζονται με σκούρο μπλε χρώμα, ενώ οι ώρες χωρίς σωστή εφαρμογή με ανοιχτόμπλε. Περνώντας το ποντίκι πάνω από μια μπάρα εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες για εκείνη την ημέρα. Η μαύρη γραμμή [3] αναφέρεται στις συνιστώμενες ώρες χρήσης του κορσέ. Στο πάνω μέρος του γραφήματος, μπορείτε να ορίσετε ένα προσαρμοσμένο εύρος ημερών [1]. Η γραμμή τάσης, που αντιπροσωπεύει τα συνδυασμένα δεδομένα τόσο από τη σωστή όσο και από τη μη σωστή εφαρμογή, εμφανίζεται με μπλε χρώμα [4]. Όταν περνάτε το ποντίκι πάνω από μια συγκεκριμένη ημέρα στο γράφημα, εμφανίζεται μια λεπτομερής σύνοψη για εκείνη την ημέρα [5]. Επιλέγοντας το κουμπί Ιστορικό Πίεσης [6], οι χρήστες μπορούν να δουν ένα πιο αναλυτικό γράφημα που απεικονίζει την πίεση που ασκείται στους αισθητήρες με την πάροδο του χρόνου.

Wearing Time

Fitting History

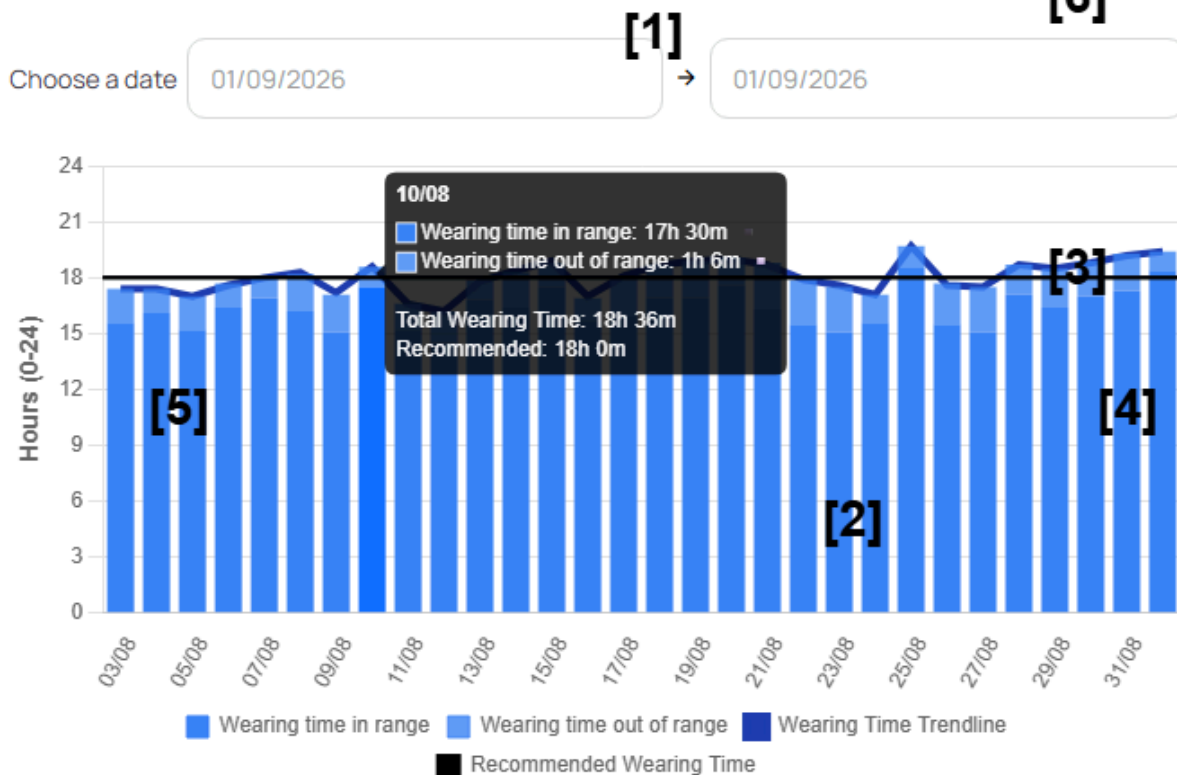

Δίπλα από το γράφημα χρήσης, παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικές με την πορεία της θεραπείας όπως:

1. Η ημερομηνία που ξεκίνησε τη θεραπεία (ημερομηνία εγγραφής στο **ScolioSense**)
2. Η μέτρηση Risser ή Sanders
3. Η γωνία Cobb
4. Η γωνία Cobb φορώντας τον κηδεμόνα (στην περίπτωση που ο ασθενής έχει σκολίωση τύπου S τότε εμφανίζονται και οι δυο γωνίες Cobb).

Τέλος, για να ξεκινήσετε τη [διαδικασία ρύθμισης του κηδεμόνα](#) θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί **Start Calibration**[1].

Status

Started on

29 September 2023

Risser classification

Stage 4

Starting Cobb Angle 1

45

Cobb Angle 1 with brace

43

Starting Cobb Angle 2

27

Cobb Angle 2 with brace

23

Calibrated by:

Demo Doctor

Start Calibration

[1]


Σελίδα γραφημάτων πίεσης (Adjustment graph)

Επιλέγοντας το κουμπί Adjustment history στην καρτέλα του ασθενή, μεταφέρεστε στη σελίδα γραφημάτων πίεσης.



Κάθε γράφημα αντιπροσωπεύει έναν αισθητήρα και εμφανίζει τα δεδομένα τοποθέτησης. Οι μαύρες διακεκομμένες γραμμές αντιπροσωπεύουν το ανώτερο και το κατώτερο όριο του βαθμονομημένου εύρους του αισθητήρα, ενώ η μπλε γραμμή τάσης δείχνει την εξέλιξη της τοποθέτησης του κηδεμόνα με την πάροδο του χρόνου.


Sensor 1 - Fitting chart

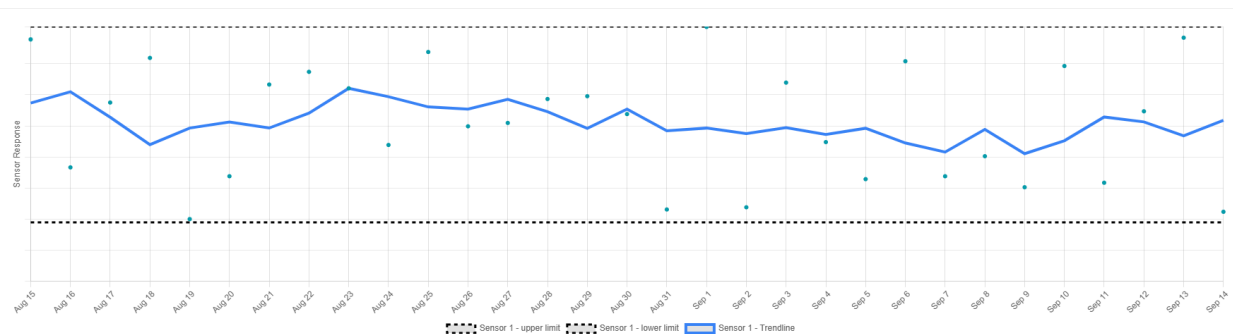

Fitting History

Επιλέγοντας το κουμπί «Fitting History» στην καρτέλα του ασθενή, ο χρήστης μεταφέρεται στη σελίδα Χρονικής Ανάλυσης Αισθητήρων, όπου εμφανίζονται τα δεδομένα τάσης του ιστορικού εφαρμογής για κάθε αισθητήρα σε ολόκληρο το ιστορικό του ασθενή, συμπεριλαμβανομένων των τιμών αναφοράς κατωφλίου βαθμονόμησης.

Sensor 1 - Trendline

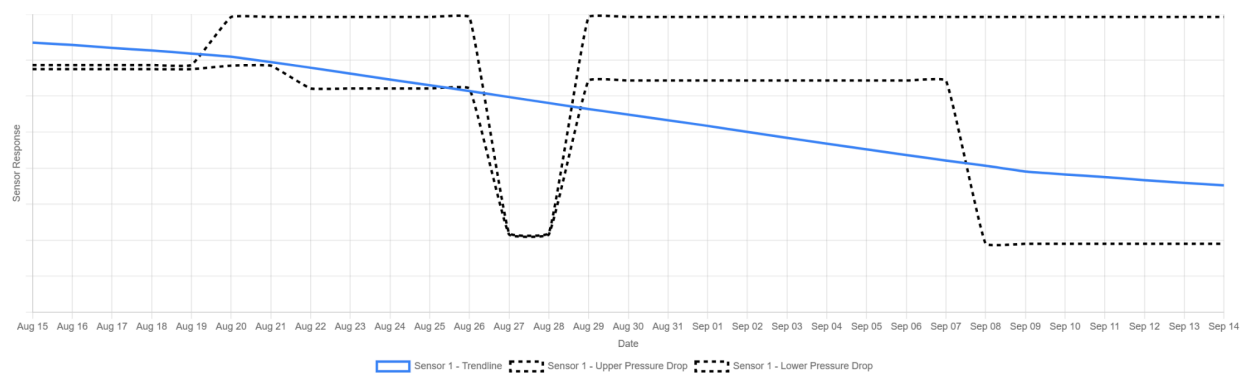

Σελίδα τροποποίησης στοιχείων ασθενή (Edit patient)

Μέσα από τη σελίδα επεξεργασίας του ασθενή, μπορείτε να επεξεργαστείτε όλες τις πληροφορίες του ασθενή.

Η διαγραφή ασθενή γίνεται με το κουμπί Remove Patient[1].

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαγραφή ασθενή είναι **μη αναστρέψιμη!**

Για την αλλαγή τη φορητής συσκευής ενός ασθενή θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί Change **ScolioSense**[2]. Μετά την αλλαγή της συσκευής θα πρέπει να γίνει εκ νέου ρύθμιση.

Σε περίπτωση που αλλάξετε τον αριθμό των αισθητήρων ή τις θέσεις των αισθητήρων τότε θα πρέπει να γίνει εκ νέου η διαδικασία ρύθμισης[3].


Για την αποθήκευση των αλλαγών θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί Submit[4].

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την αποθήκευση των αλλαγών, μπορείτε να μεταφερθείτε στην καρτέλα του ασθενή χωρίς αποθήκευση πατώντας το Cancel Without Saving.

Ρύθμιση κηδεμόνα-Calibration

Για τη ρύθμιση των αισθητήρων ο ασθενής θα πρέπει να φοράει τον κηδεμόνα και να βρίσκεται σε όρθια θέση. Η ρύθμιση της σωστής τοποθέτησης του κηδεμόνα καθορίζεται από τον χρήστη της διαδικτυακής πλατφόρμας **ScolioSense**. Ο ασθενής θα πρέπει να έχει το **ScolioSense app**

στην κινητή συσκευή του, να έχει πραγματοποιήσει είσοδο στην εφαρμογή καθώς και να έχει ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο και ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες τοποθεσίας και Bluetooth. Επίσης, θα πρέπει να βρίσκεται στη σελίδα adjustment

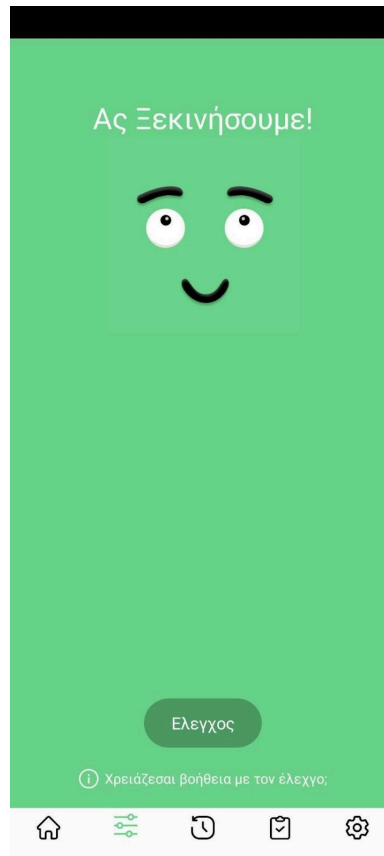


Επιλογές Βαθμονόμησης:

Τύπος Βαθμονόμησης

- **Βαθμονόμηση Κατωφλίου (Συνιστώμενη):** Ορίζει μόνο ένα ελάχιστο όριο πίεσης. Οι ενδείξεις πάνω από αυτό το όριο θεωρούνται ενδεδειγμένες.
- **Βαθμονόμηση Εύρους:** Ορίζει τόσο το ελάχιστο όσο και το μέγιστο όριο πίεσης. Οι μετρήσεις πίεσης του ασθενούς πρέπει να παραμένουν εντός αυτού του εύρους για να θεωρούνται ενδεδειγμένες.

Select a Method: Range vs. Threshold

Left Upper Thoracic

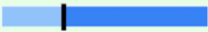

As a Threshold (Recommended)

Using a single threshold sets one lower boundary based on the minimum value recorded during calibration. Readings that stay above it count as wearing time in range; readings below it count as wearing time out of range. The fitting area is visualized from that boundary to the end of the sensor bar.

As a Threshold (Recommended)

Left Upper Thoracic



As a Range

Using a range sets a lower and an upper boundary based on the minimum and maximum values recorded during calibration. Readings that stay within them count as wearing time in range; readings outside them count as wearing time out of range. The fitting area is visualized between those boundaries on the sensor bar.

As a Range

Μόλις τοποθετήσετε τον κηδεμόνα του ασθενή στην επιθυμητή θέση θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί **Start calibration**.


Στη συνέχεια αποστέλλεται μια ειδοποίηση στην κινητή συσκευή του ασθενή και ξεκινάει η διαδικασία της ρύθμισης.

Calibration process

x

Calibration is about to start, make sure that:

- The patient is connected with a ScolioSense
- Pressure is applied to the sensors
- The patient is currently on the adjustment (Green) page on the ScolioSense mobile application

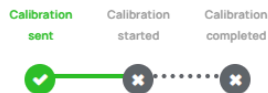

Close

Start calibration

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης του κηδεμόνα ο ασθενής θα πρέπει να πάρει δύο βαθιές αναπνοές και στη συνέχεια να αναπνέει κανονικά, ώστε να ρυθμιστούν σωστά τα όρια πιέσεων των αισθητήρων.

Calibration process

×

Calibration is about to start, make sure that:

- The patient is connected with a ScolioSense
- Pressure is applied to the sensors
- The patient is currently on the adjustment (Green) page on the ScolioSense mobile application



Close

Start calibration

Η διαδικασία της ρύθμισης του κηδεμόνα φαίνεται παρακάτω μέσα από το **ScolioSense app** σε περιβάλλον Android. Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυτόματα.



Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία βαθμονόμησης, το παράθυρο θα ανανεωθεί και θα εμφανιστούν τα όρια της προηγούμενης και της νέας βαθμονόμησης. Το εύρος πίεσης για τη

συνιστώμενη χρήση εμφανίζεται με σκούρο μπλε, ενώ το μη συνιστώμενο εύρος εμφανίζεται με ανοιχτό μπλε.

Sensor calibration ×

Calibration is about to start, make sure that:

- The patient is connected with a ScolioSense
- Pressure is applied to the sensors
- The patient is currently on the adjustment (Green) page on the ScolioSense mobile application

Right Lumbar

Left Upper Thoracic

Previous Calibration

New Calibration

Calibration completed successfully. You may now close this window or initiate another calibration by clicking Start Calibration.

Calibration sent

Calibration started

Calibration completed

✓

✓

✓

Close

Start new calibration

Βοήθεια

Μέσα από τη σελίδα βοήθειας μπορείτε να μάθετε περισσότερα για όλες τις λειτουργίες της πλατφόρμας του **ScolioSense**, και τρόπους αντιμετώπισης πιθανών προβλημάτων.

Dashboard

Patient

Account

DASHBOARD

Add Patient

My Patients

Adherence

Overview

PATIENT

Ειδοποιήσεις

- **Εβδομαδιαία Αναφορά Συμμόρφωσης:** σύνοψη του μέσου χρόνου φορέματος ανά ασθενή.
- **Αναφορά Πτώσης Ενδείξεων:** καθημερινή ανάλυση όταν η πίεση φορέματος πέφτει κάτω από το επιλεγμένο κατώφλι.
- **Ελλείπουσες Ρυθμίσεις κηδεμόνα:** ασθενείς που δεν έχουν πραγματοποιήσει ρυθμίσεις κηδεμόνα εντός της επιλεγμένης περιόδου.
- **Αναφορά Συγχρονισμού Δεδομένων:** υπενθυμίσεις όταν η συσκευή δεν έχει συγχρονίσει δεδομένα πρόσφατα.

Εβδομαδιαία Αναφορά Συμμόρφωσης

Παρακολουθήστε τον χρόνο φόρεσης του κηδεμόνα για κάθε ασθενή σε σύγκριση με τον καθορισμένο στόχο. Μπορείτε να ντοπίστε γρήγορα μοτίβα μη συμμόρφωσης.

Weekly Compliance Report				
Patient	Last Sync	Wearing Time	Phone Number	Action
Emma Dubois	38 Days	14.4h / 18h Weekly average	306983581633	
Luca Moretti	25 Days	14.5h / 12h Weekly average	306973484612	
Sofia Marinou	5 Days	18.2h / 18h Weekly average	306987991501	
Jonas Schneider	0 Days	13.8h / 18h Weekly average	306983581633	

Close

Αναφορά Πτώσης Ενδείξεων

Λαμβάνετε ειδοποίηση όταν ο αισθητήρας ενός ασθενή δείχνει σημαντική πτώση στις ενδείξεις του αισθητήρα που ενδεχομένως υποδεικνύει χαλάρωση, αποκόλληση ή εσφαλμένη εφαρμογή.

Προσαρμόσιμο εύρος: μπορείτε να ορίσετε το κατώφλι ειδοποίησης (π.χ. 20%, 40%) ώστε να φιλτράρονται μόνο οι κρίσιμες περιπτώσεις.

Reading Drop Report				
2 Patients with reading drop Search Patients Minimum Drop: 10% Timeframe: 7 Days 15-25% 26%+ Settings Generated: 31/8/2026, 11:19:47 π.μ. Reading drop is based on the lower limit set during the last brace calibration.				
Patient	Reading Drops (Max Drop)	Last Calibration	Latest Sync	Action
Emma Dubois	Right Thoracic: -32.5%	31/8/2026	Never Synced	
Luca Moretti	Never Adjusted	31/8/2026	Never Synced	
Previous 1 Next				

Αναφορά Κατάστασης Συγχρονισμού Ασθενή

Ενημερώνεστε για ασθενείς που δεν έχουν συγχρονίσει για X+ ημέρες, ένας γρήγορος τρόπος εντοπισμού αποδέσμευσης ή τεχνικών προβλημάτων.

Patient Sync Status Report		
66 Patients Not Synced for 14+ Days Search Patients Settings Generated: 11/11/2025, 10:00:09 AM		
Patient	Last Sync	Action
Tasos Anastasiadis	21 Days 10/11/2025, 9:47:35 PM	
Harry Yeremtzes	54 Days 9/8/2025, 1:39:16 PM	
Jim moustakas	68 Days 8/25/2025, 11:41:03 AM	

Αναφορά Ελλειπουσών Ρυθμίσεων

Μπορείτε να εντοπίζετε ασθενείς που δεν έχουν πραγματοποιήσει ρυθμίσεις κδημόνα ,συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του πόσοι αισθητήρες παραμένουν εκτός εύρους.

Missing Brace Fittings Report			
2 Missing Brace Fittings for 7+ Days Generated: 14/9/2026, 3:01:22 μ.μ. Search Patients 0-4 Days 5-7 Days 8-14 Days 15+ Days Settings			
Patient	Last Adjustment	Sensor Status	Action
Emma Dubois	10 Days 4/9/2026, 3:01:22 μ.μ.	1 Of 2 In Range	🔔 👤
Luca Moretti	Never Adjusted	0 Of 2 In Range	🔔 👤
Previous 1 Next			
Close			

Μπορείτε να μεταβείτε στο **Web Notifications > Settings** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένες αναφορές, να επιλέξετε ημέρα/ώρα και να αποθηκεύσετε.

Ρυθμίσεις Ειδοποιήσεων

Στην ενότητα Ρυθμίσεις Ειδοποιήσεων, μπορείτε να διαμορφώσετε τις αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις και αναφορές που στέλνει το σύστημα σχετικά με τους ασθενείς. Αυτό σας επιτρέπει να:

- ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τις Ειδοποιήσεις Πτώσης Πίεσης και να ορίσετε το ποσοστό κατωφλίου, την περίοδο ανάλυσης και την ώρα της καθημερινής αναφοράς
- ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τις Ειδοποιήσεις Ελλειπουσών Ρυθμίσεων Κορσέ και να ορίσετε τον αριθμό ημερών κατωφλίου και την ώρα της καθημερινής αναφοράς
- ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τις Ειδοποιήσεις Συγχρονισμού Δεδομένων και να ορίσετε τον αριθμό ημερών κατωφλίου και την ώρα της καθημερινής αναφοράς
- ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την Αναφορά Συμμόρφωσης Ασθενή και να ορίσετε την ημέρα της εβδομάδας και την ώρα αποστολής της

Αυτή η λειτουργία σας δίνει τον έλεγχο του ποιες ειδοποιήσεις είναι ενεργές και πόσο ευαίσθητες είναι, επιτρέποντάς σας να προσαρμόσετε το σύστημα ειδοποιήσεων ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες σας και τις απαιτήσεις των ασθενών σας.

Προτιμήσεις Ασθενή,

Στην ενότητα Προτιμήσεις Ασθενή, μπορείτε να ενεργοποιήσετε συγκεκριμένους ασθενείς ώστε να συμπεριλαμβάνονται σε κάθε τύπο ειδοποίησης. Αυτό σας επιτρέπει να:

ενεργοποιήσετε συγκεκριμένους ασθενείς ώστε να συμπεριλαμβάνονται σε κάθε τύπο ειδοποίησης (συμμόρφωση, πτώση πίεσης, ρύθμιση κορσέ, συγχρονισμός δεδομένων)

Αυτή η λειτουργία σας δίνει τον έλεγχο του ποιοι ασθενείς περιλαμβάνονται σε κάθε τύπο ειδοποίησης, επιτρέποντάς σας να προσαρμόσετε το σύστημα ειδοποιήσεων ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες σας και τις απαιτήσεις των ασθενών σας.

Patient Notification Preferences

Manage which patients are included in which notifications

Settings

Bulk Actions					
Patient	Weekly Report	Data Sync	Pressure Drop	Brace Adjustments	Enable/Disable All
Tasos Anastasiadis	☐	☒	☐	☒	☐

Ξέχασα τον κωδικό

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε τον κωδικό πρόσβασης σας, μπορείτε να τον ανακτήσετε σε αυτόν τον [σύνδεσμό](#).

Forgot Password

Please enter your email address and we'll send you an email with instructions to reset your password.



Reset Password

[Back](#)

Στα επόμενα λεπτά αποστέλλεται ένα email που περιέχει ένα σύνδεσμό με τη σελίδα δημιουργίας νέου κωδικού πρόσβασης. Μετά τη συμπλήρωση του κωδικού και την επιλογή του Reset Password μπορείτε να εισέλθετε στην πλατφόρμα με τον νέο σας κωδικό.

Reset Password

The password should be between 6 and 20 characters long. A strong password has a combination of letters and digits.

Email Address

New Password



Confirm password

Reset Password

Αναφορά Email

Το σύστημα ScolioSense υποστηρίζει την αποστολή μιας εβδομαδιαίας αναφοράς μέσω email στον κηδεμόνα του ασθενή. Η αναφορά περιέχει τον χρόνο χρήσης ανά ημέρα για την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι αναφορές αποστέλλονται κάθε Κυριακή στις 18:00. Σε περίπτωση που ο κηδεμόνας επιθυμεί να διακόψει τη λήψη αυτών των email, μπορεί να επισκεφθεί τον ακόλουθο σύνδεσμο:

<https://scoliosense.com/Report/Stop>. Εκεί, μπορεί να εισαγάγει τη διεύθυνση email του και να πατήσει το κουμπί "Unsubscribe". Ένα email επιβεβαίωσης θα σταλεί για την επαλήθευση της κατάργησης εγγραφής.

Μια ενδεικτική εβδομαδιαία αναφορά



ScolioSense weekly report

Tasos for the period 26/06 - 02/07:

Thursday 26/06: 24 hours

Friday 27/06: 24 hours

Saturday 28/06: 24 hours

Sunday 29/06: 24 hours

Monday 30/06: 24 hours

Tuesday 01/07: 24 hours

Wednesday 02/07: 0 hours

Total: 144 hours

Average: 21 hours per day

This is an automated message from the ScolioSense system. To stop receiving these messages, [click here](#).

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αντιμετώπιση
Δεν πραγματοποιείται σύνδεση στην πλατφόρμα	Επικοινωνήστε με την Aidplex.
Δεν εκτελείται η διαδικασία ρύθμισης του κηδεμόνα (calibration)	1. Βεβαιωθείτε πως το ScolioSense app έχει ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες τοποθεσίας και Bluetooth καθώς και ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο. 2. Βεβαιωθείτε πως το ScolioSense app είναι ανοικτό και ο ασθενής βρίσκεται στη σελίδα ελέγχου τοποθέτησης κηδεμόνα. 3. Σε περίπτωση που το ScolioSense app ανταποκρίνεται στο αίτημα calibration της πλατφόρμας αλλά η διαδικασία τερματίζεται απρόσμενα τότε: a. Απενεργοποιήστε τις υπηρεσίες τοποθεσίας και Bluetooth της συσκευής του ασθενή και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά τις παραπάνω υπηρεσίες. b. Επανεκκινήστε το ScolioSense app. Κλείσιμο της εφαρμογής από το παρασκήνιο και επανάλυση της δοκιμής.

	4. Σε περίπτωση που το ScolioSense app δεν ανταποκρίνεται στο αίτημα calibration της πλατφόρμας τότε: - Πραγματοποιήστε αποσύνδεση του ασθενή από το ScolioSense app και στη συνέχεια πραγματοποιήστε σύνδεση του ασθενή στο ScolioSense app. - Απεγκαταστήστε το ScolioSense app και επανεγκατάσταση το στη συσκευή του ασθενή. Αν το πρόβλημα συνεχιστεί επικοινωνήστε με την Aidplex.
Ο ασθενής δεν έλαβε το email εγγραφής του από την πλατφόρμα	- Βεβαιωθείτε πως δεν έχει παραδοθεί κάποιο email στη διεύθυνση που έχει δώσει ο ασθενής, τόσο στα εισερχόμενα όσο και στον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam). - Βεβαιωθείτε για τη σωστή καταχώρηση της διεύθυνσης που έχει δώσει ο ασθενής μέσα στην πλατφόρμα. - Διαγράψτε τον ασθενή από την πλατφόρμα και δημιουργήστε νέο λογαριασμό ασθενή. Αν το πρόβλημα συνεχιστεί επικοινωνήστε με την Aidplex.

Νομικές πληροφορίες

Η **Aidplex** αποκλείει κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων, απώλεια κερδών ή οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία υποστεί ο τελικός πελάτης.

Η φορητή συσκευή **ScolioSense** έχει εγγύηση για 2 έτη από την αγορά, ημερομηνία κατά την οποία χρησιμοποιείται σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο.

Η **Aidplex** μπορεί να προχωρήσει στην αντικατάσταση μιας συσκευής **ScolioSense** (εφόσον κριθεί απαραίτητο) χωρίς χρηματική επιβάρυνση, στην περίπτωση ενεργής εγγύησης.

Προσοχή:

Η εγγύηση είναι άκυρη σε περίπτωση τροποποίησης ή αντικατάστασης οποιουδήποτε εξαρτήματος της συσκευής **ScolioSense** από προσωπικό χωρίς την εξουσιοδότηση της **Aidplex** ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της.

Η **Aidplex** δεν εγγυάται κανένα θεραπευτικό αποτέλεσμα κατά τη χρήση του **ScolioSense**.

Πολιτική εξυπηρέτησης

Πολιτική εξυπηρέτησης

Όποτε το προϊόν **ScolioSense** επισκευάζεται, οι ρυθμίσεις ενδέχεται να αλλάξουν ή να προκληθεί απώλεια δεδομένων στη συσκευή.

Προειδοποίηση

Πριν την αποστολή για επισκευή, τα δεδομένα της συσκευής ScolioSense θα πρέπει να συγχρονιστούν μέσω της εφαρμογής ScolioSense (εφόσον είναι δυνατόν), για τη διατήρηση των δεδομένων της.

Η Aidplex διαθέτει ομάδα υποστήριξης για το ScolioSense στην οποία μπορείτε να απευθυνθείτε καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών, κατά τις ώρες (Ελλάδος) 10.00-18.00, μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 2316014433 είτε μέσω Email: support@aidplex.com για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα σχετικά με το προϊόν.

Προειδοποίηση

Το **ScolioSense** είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας 1, εξάρτημα του ιατροτεχνολογικού προϊόντος κατηγορίας 1 κηδεμόνα σκολίωσης.

Το **ScolioSense** πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν το **ScolioSense**.

Συμβουλευτείτε ανά τακτά διαστήματα τον ιστότοπο της **Aidplex** ή του **ScolioSense** για διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με αντενδείξεις, κινδύνους ή παρενέργειες σχετικά με το **ScolioSense**.

Το **ScolioSense** δεν προσφέρει συμβουλές θεραπείας ή οποιαδήποτε ιατρική διάγνωση.

Η **Aidplex** δεν εγγυάται κανένα θεραπευτικό αποτέλεσμα κατά τη χρήση του **ScolioSense**.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Βασιλέως Ηρακλείου 40 Θεσσαλονίκη, 54623

Τηλέφωνο: 2316014433

Email: info@aidplex.com